



Інструкція з використання

Мішки для утилізації медичних відходів класу В

Цей виріб розроблений і виготовлений у відповідності з основними вимогами

Технічного регламенту щодо медичних виробів України і для цього пристрою застосовувалися процедури Додатку 8 для маркування знаком відповідності.



УВАГА! Перед використанням виробу ознайомтесь з Інструкцією.

УВАГА! Використовуйте виріб лише за призначенням.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Мішок для утилізації медичних відходів класу В (далі – виріб) призначений для утилізації епідеміологічно небезпечних медичних відходів в медичних закладах усіх профілів.

ОПИС: Виріб з поліетилену, двушаровий дає можливість утилізувати відходи засіб в об'ємах: 3 л, 10 л, 30 л, 60 л, 120 л, 180 л, 240 л. Сприяє дотриманню гігієнічних норм в медичних установах та виключає ризик випадкового інфікування.

Об'єкти застосування:

Гострі предмети: голки, шприци, скальпелі та їх леза, предметні скельця, ампули, порожні пробірки, битий скляний посуд, вазофікси, пір'я, піпетки, ланцети, предмети, забруднені кров'ю або іншими біологічними рідинами, тканини, органи, частини тіла, плацента, ембріони, харчові відходи з інфекційних відділень закладу, мікробіологічні культури і штами, що містять будь-які живі збудники хвороб, штучно вирощені в значних кількостях, живі вакцини, непридатні до використання, а також лабораторні чашки та обладнання для їх перенесення, залишки живильних середовищ, інкуляції, змішування мікробіологічних культур збудників інфекційних захворювань, інфіковані експериментальні тварини та біологічні відходи віваріїв, відходи лікувально-діагностичних підрозділів закладів та диспансерів, забруднених мокротинням пацієнтів, мікробіологічних лабораторій, що здійснюють роботу із збудниками туберкульозу.




КОМПЛЕКТНІСТЬ:

1. Упаковка – 100 шт;
2. Ємність: 3 л, 10 л, 30 л, 60 л, 120 л, 180 л, 240 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал: Поліетилен марки ПЕ.
Товщина ПЕ: 20 мкм, 30 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
Колір: червоний.
Термін експлуатації – 5 років.

ЗРАЗОК МАРКУВАННЯ:

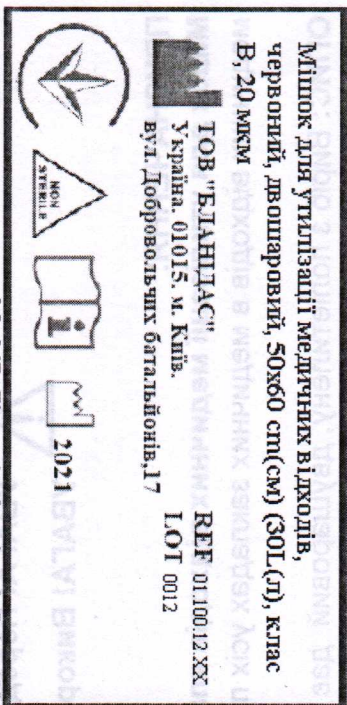

Використання:

1. Дістаньте пакет потрібного вам класу з упаковки.
2. Розправте пакет та розкрийте його по горловині.
3. Руками надайте йому округлу форму.
4. Вставте його у пластикову тару.
5. Для фіксації пакету завітуйте його по краю тари.
6. Перевірте, чи прилягає дно пакету до тари.
7. Заповніть пакет на $\frac{3}{4}$ відходами обраного класу небезпеки. Слідкуйте за тим, щоб в пакет не потрапив гострий інструментарій.



8. Зберіть край пакету та видаліть з нього повітря.
9. Зафіксуйте горловину пакета.
10. Загерметизуйте пакет.
11. Заповніть інформаційне вікно на пакеті.
12. Пакет готовий до транспортування з місця утворення відходів на місце тимчасового зберігання відходів на території ЛПУ.

Зберігання:

Зберігати виріб потрібно в оригінальній упаковці, на стелажах у приміщенні, що вентильовується при температурі від -10 до +25°C та відносній вологості повітря 30 - 80% $\pm$ 10%, захищеному від потрапляння пилу і механічних навантажень. Гарантійний термін зберігання 5 років з дня виготовлення, за дотримання умов зберігання.

Утилізування:

Всі вироби потрібно утилізувати відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм.

Гарантія виробника:

Виробник гарантує термін придатності для експлуатації виробів 5 років з дати виробництва при дотриманні умов і правил експлуатування, транспортування і зберігання.

Виробник:

ТОВ «Бланідас», 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 17, тел.: 0800 33 15 02, e-mail: help@yusofom.ua

